

検査内容変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目を変更しますのでご案内いたします。

記

■実施日 令和3年9月2日(木) ご依頼分より

■変更内容

総合検査案内頁	検査項目	インフォメーションページ	総合検査案内頁	検査項目	インフォメーションページ
p43	SP-D (肺サーファクタント プロテインD)	p2	p99	プロプラノロール	p5
p59	サイトメガロウイルス「定量」IgG	p3	p67	単純ヘルペスウイルス DNA 定性	
p59	サイトメガロウイルス「定量」IgM	p4	p67	水痘・帯状疱疹ウイルス DNA (VZV) 定性	
p33	L-ドーパ	p5	p67	ヒトヘルペスウイルス 6 型 DNA 定性	
p33	セロトニン		p67	ヒトヘルペスウイルス 7 型 DNA 定性	
p37	CSLEX (シアリル LeX 抗原)		p75	サイトメガロウイルス DNA 定性	
p38	BFP (塩基性フェトプロテイン)				


詳細については次頁以降をご覧ください。

● SP-D (肺サーファクタント プロテイン D)

全自動測定機器へ搭載可能な試薬へと変更させていただきます。
これに伴い、項目コード、検査方法が変更となります。

総合検査案内頁	項目コード	検査項目	変更内容	新	現
p43	0473-02	SP-D (肺サーファクタント プロテイン D)	項目コード	7249-02	0473-02
			検査方法	CLEIA	EIA

▼現法と新法の比較

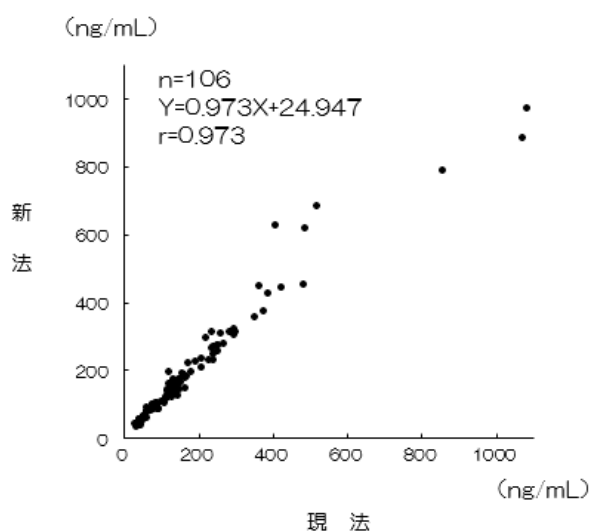

● サイトメガロウイルス「定量」 IgG

全自動測定機器へ搭載可能な試薬へと変更させていただきます。
これに伴い、項目コード、検査方法、基準範囲、単位、備考欄が変更となります。


総合検査案内頁	項目コード	検査項目	変更内容	新	現
p59	3217-02	サイトメガロウイルス「定量」IgG	項目コード	7247-02	3217-02
			検査方法	CLIA	EIA
			基準範囲	6.0未満 陰性 判定基準 下記参照	2.0未満 陰性 判定基準 下記参照
			単位	AU/mL	なし
			備考欄		下記参照(*固相法) (*固相法[髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵)基準値 0.20未満 陰性])

▼判定基準

新		現	
判定	IgG(AU/mL)	判定	IgG(EIA 価)
陰性	6.0未満	—	2.0未満
判定保留		±	2.0~3.9
陽性	6.0以上※	+	4.0以上

※ 6.0~15.0AU/mLの結果値の際には、適切な期間(例:2週間)内に再採取し、再検査をお勧めします。

▼現法と新法の比較

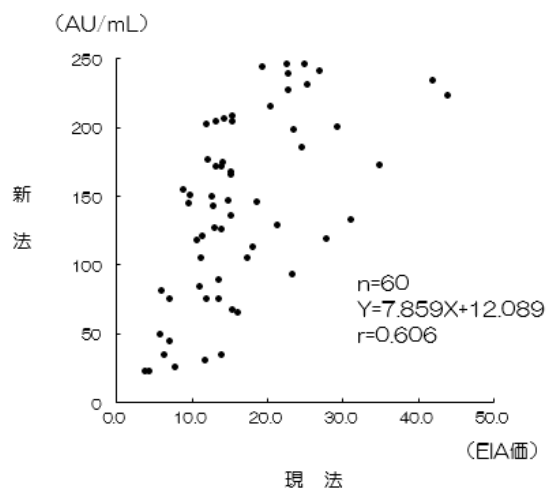

相関一致表

		現法		
		—	±	+
新法	—	27	2	0
	±	0	0	0
	+	0	1	87

一致率：95.3% (N=117)

● サイトメガロウイルス「定量」IgM

全自動測定機器へ搭載可能な試薬へと変更させていただきます。
これに伴い、項目コード、検査方法、基準範囲、単位、備考欄が変更となります。


総合検査案内頁	項目コード	検査項目	変更内容	新	現
p59	4A06-02	サイトメガロウイルス「定量」IgM	項目コード	7246-02	4A06-02
			検査方法	CLIA	EIA
			基準範囲	0.85 未満 陰性 判定基準 下記参照	0.80 未満 陰性 判定基準 下記参照
			単位	Index	なし
			備考欄		下記参照(*捕捉法) (*捕捉法[髄液の測定も可能です 検体量 0.4mL(冷蔵)基準値 0.80 未満 陰性])

▼判定基準

新		現	
判定	IgM(Index)	判定	IgM(抗体指数)
陰性	0.85 未満	—	0.80 未満
判定保留	0.85~1.00 未満※	±	0.80~1.20
陽性	1.00 以上	+	1.21 以上

※ 判定保留の際には、適切な期間(例:2週間)内に再採取し、再検査をお勧めします。

▼現法と新法の比較

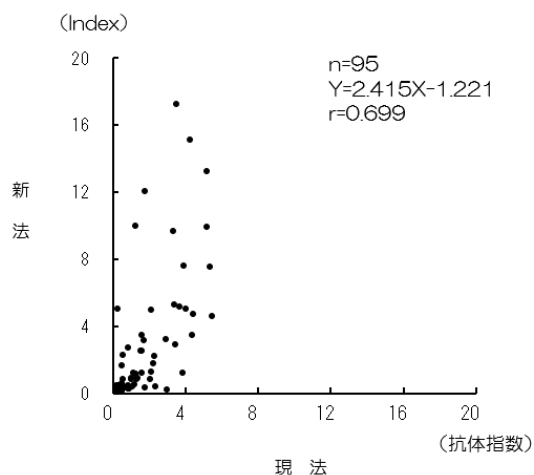

相関一致表

		現法		
		—	±	+
新法	—	68	6	6
	±	0	1	1
	+	2	2	29

一致率：85.2% (N=115)

● 変更一覧表

総合検査案内頁	項目コード	検査項目	変更内容		新	現	備考
p33	2062-03	L-ドーパ	所要日数(日)		5~19	5~12	
p33	2067-03	セロトニン			3~8	3~7	
p37	3027-02	CSLEX (シアリル Le ^x 抗原)			2~9	2~7	
p38	3020-02	BFP (塩基性フェトプロテイン)			2~9	2~5	
p99	0341-02 0341-03	プロプラノロール			4~18	4~11	
p67	3196-04	単純ヘルペスウイルス DNA 定性	検体量	髄液	0.7	0.5	適正な検体量へ変更いたします
	3196-37			組織	50(mg)	5(mg)	
p67	3213-04	水痘・帯状疱疹ウイルス DNA (VZV) 定性		髄液	0.7	0.5	
p67	3233-04	ヒトヘルペスウイルス 6 型 DNA 定性		髄液	0.7	0.5	
	3233-37			組織	50(mg)	5(mg)	
p67	3234-04	ヒトヘルペスウイルス 7 型 DNA 定性		髄液	0.7	0.5	
	3234-37			組織	50(mg)	5(mg)	
p75	3221-04	サイトメガロウイルス DNA 定性		髄液	0.7	0.5	
	3221-37			組織	50(mg)	5(mg)	
	3221-54			部分尿	0.7	0.5	